



PharmaWeigh

Sistema de Control de Producción y Calidad Farmacéutica

Manual de Almacén

Guía de recepción, almacenamiento y gestión de materias primas

Almacenista Torres

Rol: ALMACEN

Versión 1.0

Septiembre de 2026

Este documento es confidencial y de uso interno. Contiene credenciales personales de acceso al sistema. No compartir ni reproducir sin autorización.


Índice

1. Acceso al sistema

URL del sistema	https://pharma-formweigh.vercel.app
Tu usuario	almacen@pharma.com
Tu contraseña	almacen123
Tu perfil	Almacén: recibes materias primas, gestionas el inventario y surtes materiales a producción.

Para ingresar al sistema:

1. Abre tu navegador web (Chrome recomendado).
2. Ve a la dirección https://pharma-formweigh.vercel.app.
3. Ingresa tu *email* y tu *contraseña*.
4. Haz clic en **[Ingresar]**.

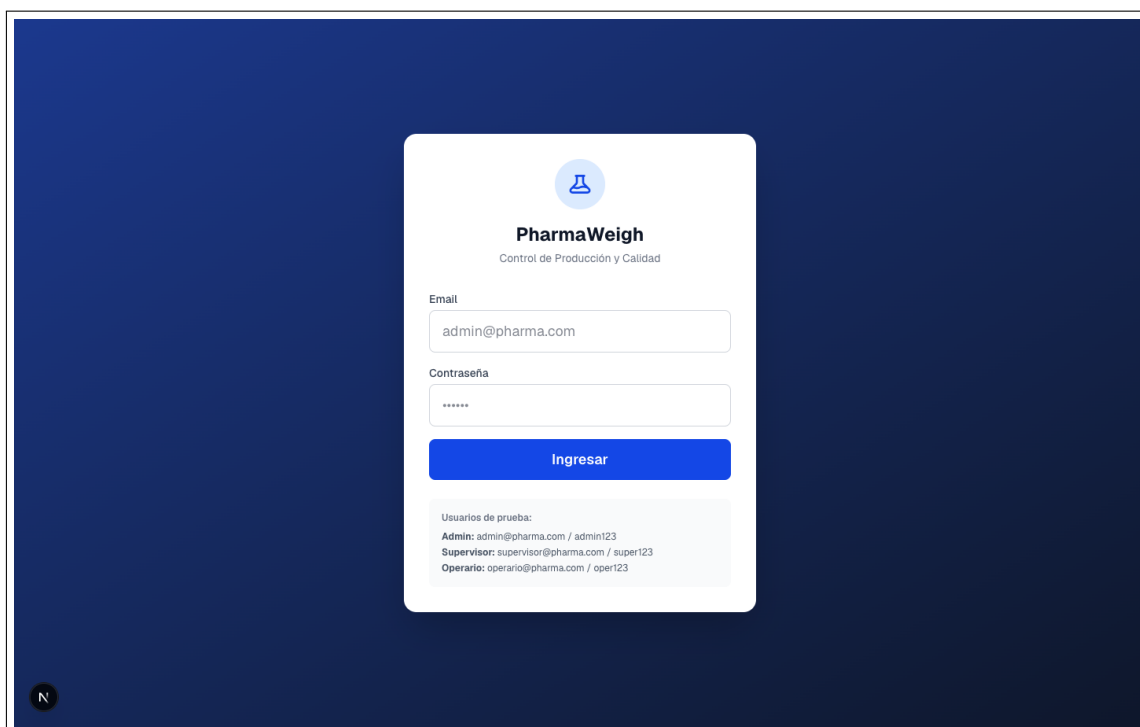


Pantalla de inicio de sesión. Ingresa tu email y contraseña.

Como **Almacenista**, tu función principal es recibir materias primas, registrarlas en el sistema y mantener el inventario actualizado.

Tu menú lateral muestra: Dashboard, Inventario, Códigos de Barras. No tienes acceso a Recetas, Órdenes, Dispensado, Auditoría ni Usuarios.


2. Tu rol en el proceso de producción

Tú eres el **punto de entrada** de todas las materias primas al sistema:

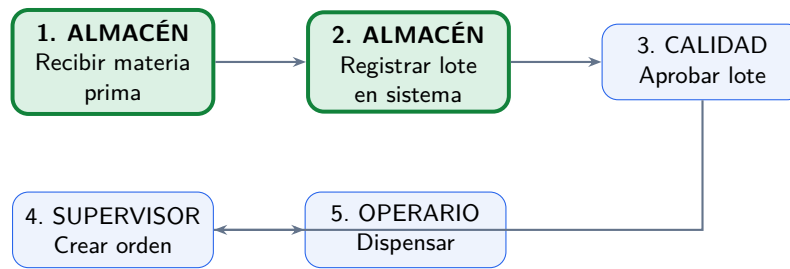

Sin tu registro, el material **no existe** para el sistema y no puede usarse en producción.

3. Dashboard

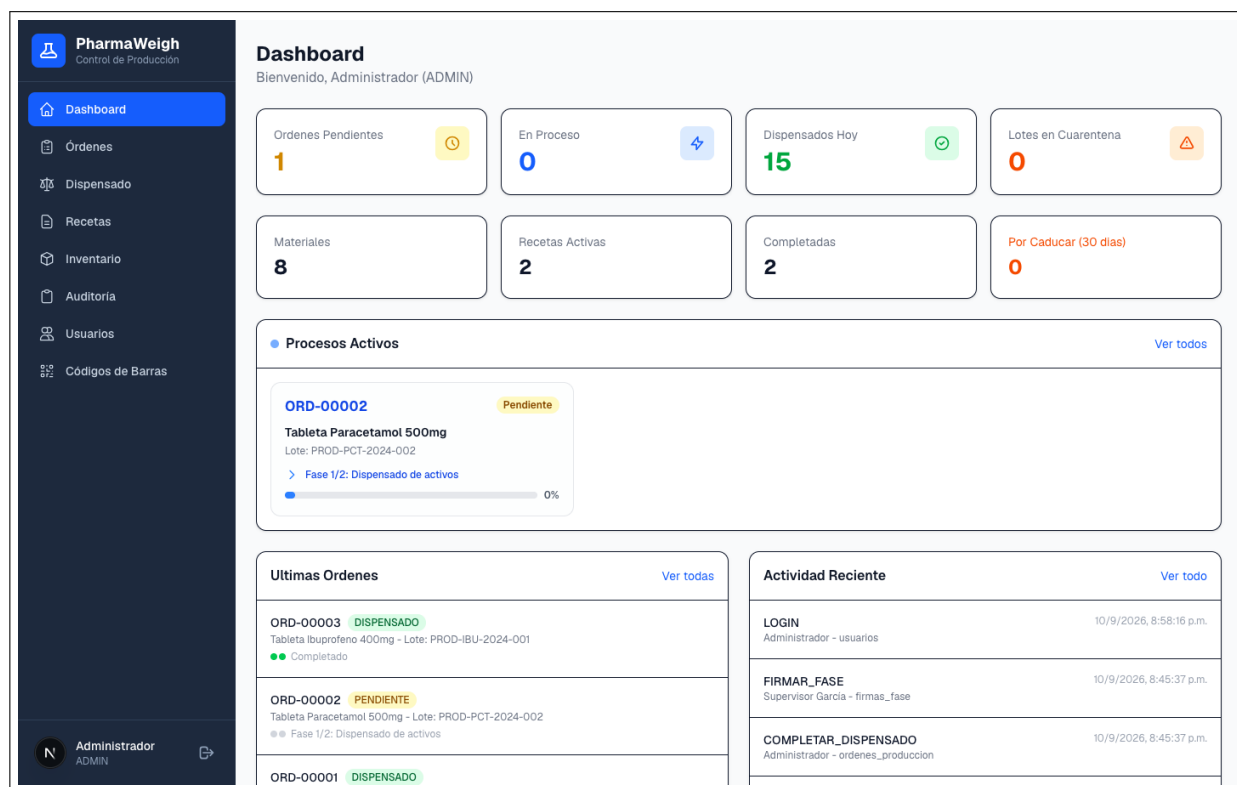

Dashboard principal con indicadores de producción.


Como Almacenista, los indicadores clave son:

- **Materiales:** total de materias primas en el sistema.
- **Lotes en Cuarentena:** lotes que registraste y esperan aprobación de Calidad.
- **Por Caducar (30 días):** lotes próximos a vencer — coordina su uso prioritario.

4. Equipo de trabajo

4.1 Pistola láser (lector de código de barras)

Tu herramienta principal es la **pistola láser** de código de barras. La usas para identificar materiales rápidamente durante la recepción.

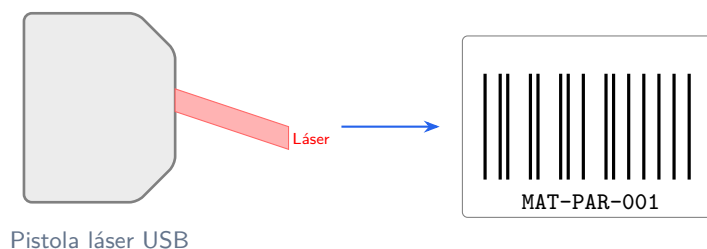

La pistola funciona como un **teclado USB**:


- Se conecta por USB a la computadora. No requiere drivers.
- Al escanear, envía los caracteres del código seguidos de **Enter**.
- El sistema identifica automáticamente el material por su código.
- Si la pistola no está disponible, puedes escribir el código manualmente.

Tip

Mantén la pistola siempre cargada (si es inalámbrica) o conectada (si es con cable). Apunta el láser al **centro** del código de barras para una lectura rápida.

4.2 Báscula para recepción (ingreso manual)

Al recibir material, necesitas pesar lo que llega. La báscula **no está conectada** al sistema — tú lees el peso en la báscula e ingresas la cantidad manualmente en PharmaWeigh.

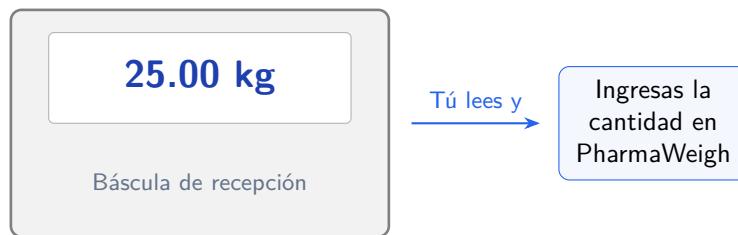

5. Recepción de materia prima

Este es tu proceso principal. Cada vez que llega material a la planta, debes registrarlo en el sistema.

5.1 Proceso paso a paso

1. Ve a **Inventario** → pestaña **Recepción**.
2. **Escanea el código de barras del material** con la pistola láser.
 - Apunta la pistola al código impreso en la etiqueta del material.
 - El campo se llena automáticamente.
 - El sistema muestra el nombre del material encontrado.
3. Si el material se identifica correctamente, llena los datos del lote:
 - *Número de Lote*: el identificador que trae el proveedor (ej: `LOT-PAR-2024-003`).
 - *Cantidad*: pesa el material en la báscula e ingresa la cantidad (ej: 25 kg).
 - *Proveedor*: nombre del proveedor.
 - *Fecha de Caducidad*: fecha de vencimiento del lote.
 - *Certificado de Análisis*: número de referencia del certificado del proveedor (opcional).
4. Haz clic en **[Registrar Lote (Cuarentena)]**.
5. El lote se crea automáticamente en estado **CUARENTENA**. **Calidad** lo revisará y aprobará después.

Pantalla de recepción: escanea el material con la pistola y llena los datos del lote.

Todo lote nuevo entra en CUARENTENA. Esto significa que no puede usarse en producción hasta que Calidad lo apruebe. Es una medida de seguridad del proceso farmacéutico (BPM/GMP).

6. Gestión de materiales

6.1 Dar de alta un material nuevo

Si llega un material que no existe en el sistema, tú puedes crearlo:

1. Ve a **Inventario** → pestaña **Materiales**.
2. Haz clic en **[+ Nuevo Material]**.
3. Llena los campos:
 - **Código:** el código de barras del material (ej: **MAT-PAR-001**). Este es el código que escaneará la pistola.
 - **Nombre:** nombre completo del material.
 - **Unidad:** kg, g, L, mL, mg o unidad.
 - **Stock Mínimo:** umbral de alerta. Si el stock baja de este valor, el material se resalta en **rojo** en el inventario.
4. Haz clic en **[Crear Material]**.

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	STOCK ACTUAL	STOCK MIN	LOTES
MAT-ALM-004	Almidón de Maíz Desintegrante y diluyente	kg	29.00	8	1
MAT-CEL-002	Celulosa Microcristalina Excipiente diluyente y aglutinante	kg	42.98	10	1
MAT-SIO-005	Dióxido de Silicio Coloidal Deslizante y adsorbente	kg	2.90	1	1
MAT-EST-003	Estearato de Magnesio Lubricante para compresión	kg	4.95	2	1
MAT-IBU-006	Ibuprofeno Principio activo antiinflamatorio	kg	13.00	3	1
MAT-LAC-007	Lactosa Monohidrato Excipiente diluyente	kg	38.50	15	1
MAT-PAR-001	Paracetamol (Acetaminofén) Principio activo analgésico y antipirético	kg	10.00	5	1
MAT-PVP-008	Povidona (PVP K30) Aglutinante húmedo	kg	8.00	3	1

Lista de materiales con código, stock actual, stock mínimo y lotes activos. Los materiales con stock bajo se resaltan en rojo.

El **Código** debe coincidir exactamente con el código impreso en las etiquetas del material para que la pistola láser lo identifique correctamente.

6.2 Cambiar estado de lotes

Como almacenista, puedes cambiar el estado de los lotes para reflejar movimientos físicos:

- Poner un lote en **CUARENTENA** si detectas un problema físico.
- Marcar un lote como **AGOTADO** si se consumió completamente fuera del sistema.

La **aprobación definitiva** de lotes corresponde a **Calidad**. Tú puedes mover estados para reflejar la realidad física del almacén, pero el dictamen de calidad lo emite el área de QA.

7. Consultar el inventario

7.1 Pestaña Materiales

Muestra todos los materiales registrados con su stock actual:

Columna	Descripción
Código	Código de barras del material
Nombre	Nombre completo
Stock Actual	Suma de todos los lotes aprobados
Stock Mínimo	Umbral de alerta (rojo si el actual es menor)
Lotes Activos	Número de lotes con estado APROBADO o CUARENTENA

7.2 Pestaña Lotes

PharmaWeigh

Control de Producción

Dashboard

Órdenes

Dispensado

Recetas

Inventario

Auditoría

Usuarios

Códigos de Barras

N

Administrador

ADMIN

Inventario

Gestión de materiales y lotes

Materiales

Lotes

Recepción

LOTE	MATERIAL	CANTIDAD	PROVEEDOR	CADUCIDAD	ESTADO	ACCIONES
LOT-PVP-2024-001	Povidona (PVP K30)	8.00 / 8.00	PolymerPharma	10/9/2027	APROBADO	
LOT-LAC-2024-001	Lactosa Monohidrato	38.50 / 40.00	Lactosa MX	10/9/2027	APROBADO	
LOT-IBU-2024-001	Ibuprofeno	13.00 / 15.00	ApiPharma Internacional	10/9/2027	APROBADO	
LOT-SIO-2024-001	Dióxido de Silicio Coloidal	2.90 / 3.00	SilicaPharma	10/9/2027	APROBADO	
LOT-ALM-2024-001	Almidón de Maíz	29.00 / 30.00	Almidones del Centro	10/9/2027	APROBADO	
LOT-EST-2024-001	Estearato de Magnesio	4.95 / 5.00	Lubrichem MX	10/9/2027	APROBADO	
LOT-CEL-2024-001	Celulosa Microcristalina	42.98 / 50.00	ExcipPharma	10/9/2027	APROBADO	
LOT-PAR-2024-002	Paracetamol (Acetaminofén)	10.00 / 10.00	Química Global	10/9/2027	APROBADO	
LOT-PAR-2024-001	Paracetamol (Acetaminofén)	-15.00 / 25.00	Farmaquimicos SA	10/9/2027	AGOTADO	

Lista de lotes con estado, cantidad, proveedor y fecha de caducidad.

Verifica regularmente:

- **Lotes en cuarentena:** recuerda a Calidad que los apruebe.
- **Lotes próximos a caducar:** coordina con el supervisor para usarlos primero (FEFO: First Expired, First Out).
- **Stock bajo:** solicita reabastecimiento al área de compras.

8. Códigos de barras

Desde **Códigos de Barras** puedes ver e imprimir los códigos de todos los lotes, materiales y badges del sistema.

8.1 Pestañas disponibles

Pestaña	Contenido
Lotes	Códigos de barras de cada lote de materia prima
Materiales	Códigos de barras de cada material registrado
Badges	Códigos de los gafetes de identificación de usuarios

Tip

Imprime los códigos de barras de los lotes nuevos y pégalos en los contenedores físicos. Así el operario podrá escanearlos fácilmente durante el dispensado.

9. Preguntas frecuentes

¿Qué hago si el material no se encuentra al escanear?

Significa que no está registrado en el sistema. Créalo primero en **Inventario** → **Materiales** → **[+ Nuevo Material]** y luego registra el lote.

¿Puedo modificar un lote ya registrado?

Puedes cambiar su estado (cuarentena, aprobado, etc.) pero no la cantidad original. Si hubo un error en la cantidad, registra un nuevo lote con los datos correctos.

¿Qué pasa si la pistola no lee el código?

Puedes **escribir el código manualmente** en el campo y presionar **[Enter]**. La pistola a veces no lee si el código está dañado, sucio o tiene bajo contraste.

¿Quién puede crear materiales y registrar lotes?

Solo usuarios con rol **ALMACEN**, **SUPERVISOR** o **ADMIN**. Los demás roles pueden consultar el inventario pero no modificarlo.