



PharmaWeigh

Sistema de Control de Producción y Calidad Farmacéutica

Manual de Almacén

Guía de recepción, almacenamiento y gestión de materias primas

Almacenista Torres

Rol: ALMACEN

Versión 2.0

Septiembre de 2026

Documento de uso interno. **No contiene contraseñas:** el administrador del sistema te entrega la tuya por separado y sólo tú debes conocerla.

Índice

1. Acceso al sistema	3
2. Tu papel dentro del sistema	5
2.1 Tu menú	5
2.2 Qué puedes y qué no	5
3. Recepción de materia prima	7
3.1 Paso a paso	7
3.2 Reglas que el sistema aplica solo	8
4. Materiales	9
4.1 Consultar existencias	9
4.2 Dar de alta un material nuevo	9
5. Lotes	11
5.1 Los estados	11
5.2 Lo único que puedes cambiar: [Retener]	11
6. Códigos de barras	13
7. Equipo de trabajo	14
7.1 Pistola lectora de código de barras	14
7.2 Báscula	14
8. Qué sí puedes romper	15
9. Preguntas frecuentes	16
Escaneo el material y dice que no se encuentra	16
¿Puedo modificar un lote que ya registré?	16
¿Por qué no puedo aprobar un lote?	16
Registré un lote y no aparece para dispensar	16
No veo el menú de Órdenes ni el de Auditoría	16
¿Qué hago con un lote rechazado?	16
Se bloqueó mi cuenta	16


1. Acceso al sistema

Dirección	<code>https://pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org</code>
Tu usuario	<code>almacen@pharma.com</code>
Tu contraseña	La entrega el administrador. No está escrita en este manual.
Tu perfil	Almacén: recibes materias primas, gestionas el inventario y surtes materiales a producción.

1. Abre el navegador (Chrome o Edge) y ve a `https://pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org`.
2. Escribe tu *Email* y tu *Contraseña*.
3. Pulsa **[Ingresar]**.

Lo que debes saber de tu acceso:

- La pantalla de entrada **no muestra usuarios ni contraseñas de ejemplo**. Si no tienes cuenta, pídesela al administrador.
- Si te equivocas, el sistema siempre responde lo mismo: *Credenciales inválidas*. No te dice si falló el correo o la contraseña.
- A los **5 intentos fallidos** con el mismo correo, ese correo queda **bloqueado 15 minutos**: Demasiados intentos fallidos. Espera 15 minutos e inténtalo de nuevo. No hay forma de desbloquearlo antes; se espera.
- Tu sesión dura **24 horas**. Después tienes que volver a entrar.
- Cada intento, acertado o fallido, queda en la bitácora con tu correo y la dirección IP de la estación.

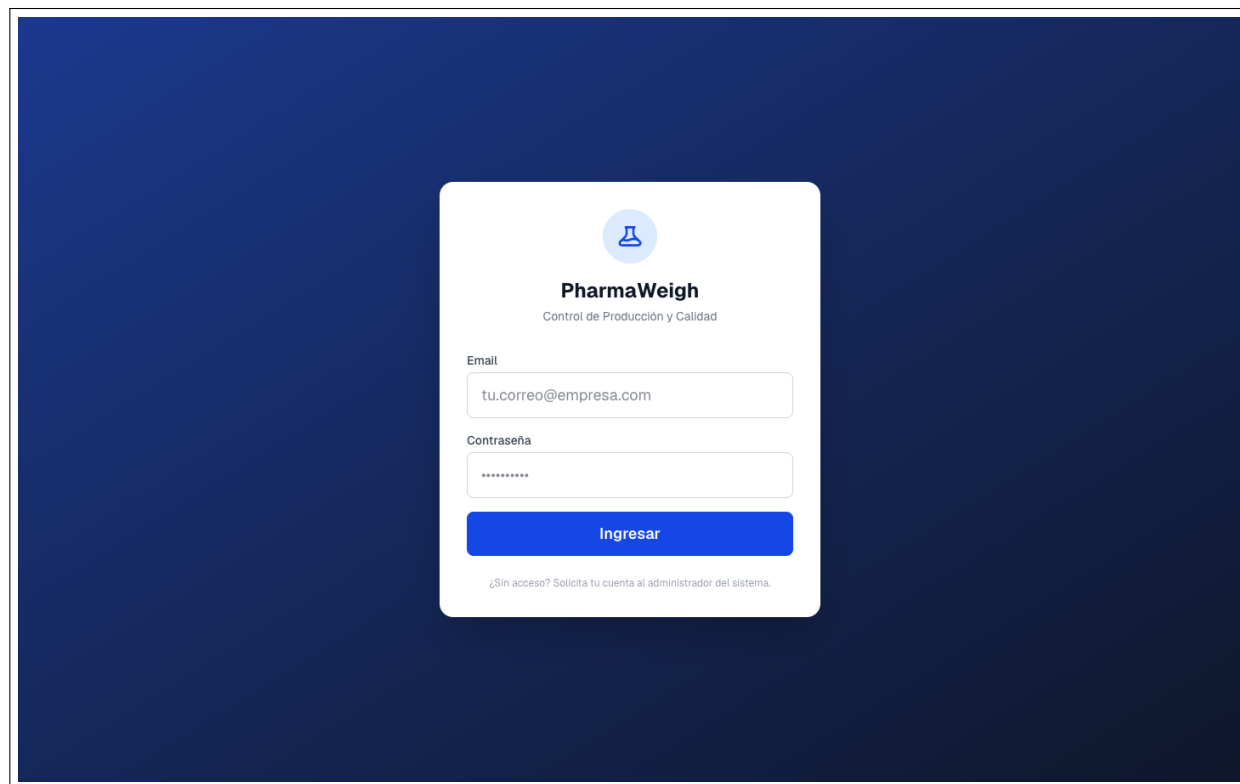

The image shows a login screen for PharmaWeigh. It features a dark blue background with a white login card in the center. The card has the PharmaWeigh logo (a blue circle with a white flask icon) and the text "PharmaWeigh" and "Control de Producción y Calidad". Below this, there are two input fields: "Email" with the placeholder "tu.correo@empresa.com" and "Contraseña" with a masked password "*****". A blue "Ingresar" button is positioned below the password field. At the bottom of the card, there is a link: "¿Sin acceso? Solicita tu cuenta al administrador del sistema."

Pantalla de entrada.

Todo lo que registres queda a tu nombre, con la hora y la dirección IP de tu equipo. No prestes tu contraseña.

Sobre normativa. PharmaWeigh incluye funciones orientadas a la trazabilidad de un proceso de dispensado (bitácora inmutable, firma electrónica, control de tolerancias y de estados de lote). El sistema **no está validado** y este documento **no acredita** cumplimiento de 21 CFR Part 11, NOM-059 ni de ninguna otra norma. La validación, si se requiere, es un proyecto aparte a cargo de la planta.

2. Tu papel dentro del sistema

Como ALMACEN eres la puerta de entrada de la materia prima: das de alta los materiales y registras los lotes que llegan. **No liberas producto**: eso lo hace Calidad.

2.1 Tu menú

Tu rol ve **tres** opciones. Es el menú más corto del sistema:

Opción	Para qué
Dashboard	Resumen general del día.
Inventario	Tu pantalla principal : materiales, lotes y recepción.
Códigos de Barras	Generar e imprimir las etiquetas de lotes y materiales.

No verás **Órdenes**, **Dispensado**, **Recetas**, **Auditoría** ni **Usuarios**. Si escribes esas direcciones a mano, el sistema te regresa al Dashboard. No es una falla: tu rol no tiene acceso a esas pantallas.

2.2 Qué puedes y qué no

Acción	Puedes
Dar de alta un material nuevo	Sí
Registrar un lote recibido (queda en cuarentena)	Sí
Regresar a cuarentena un lote aprobado ([Retener])	Sí
Consultar materiales, lotes y existencias	Sí
Imprimir códigos de barras	Sí
Aprobar un lote	No
Rechazar un lote	No
Ver o crear órdenes de producción	No
Entrar a la estación de pesaje	No
Ver recetas	No
Ver la bitácora de auditoría	No
Modificar o borrar un lote ya registrado	No

PharmaWeigh
Control de Producción

Dashboard

Órdenes

Dispensado

Recetas

Inventario

Auditoría

Usuarios

Códigos de Barras

A Administrador
ADMIN

Dashboard

Bienvenido, Administrador (ADMIN)

Órdenes Pendientes
3

En Proceso
0

Dispensados Hoy
0

Lotes en Cuarentena
0

Materiales
8

Recetas Activas
2

Completadas
0

Por Caducar (30 días)
0

Procesos Activos

Ver todos

ORD-00001

Pendiente

Tableta Paracetamol 500mg

Lote: PROD-PCT-2024-001

> Fase 1/2: Dispensado de activos

0%

ORD-00003

Pendiente

Tableta Ibuprofeno 400mg

Lote: PROD-IBU-2024-001

> Fase 1/2: Dispensado principal

0%

ORD-00002

Pendiente

Tableta Paracetamol 500mg

Lote: PROD-PCT-2024-002

> Fase 1/2: Dispensado de activos

0%

Últimas Órdenes

Ver todas

ORD-00001

PENDIENTE

Tableta Paracetamol 500mg - Lote: PROD-PCT-2024-001

●● Fase 1/2: Dispensado de activos

ORD-00002

PENDIENTE

Tableta Paracetamol 500mg - Lote: PROD-PCT-2024-002

●● Fase 1/2: Dispensado de activos

ORD-00003

PENDIENTE

Actividad Reciente

Ver todo

LOGIN

Administrador - usuarios

18/9/2026, 1:34:54 p.m.

LOGIN_FALLIDO

- usuarios

18/9/2026, 1:34:51 p.m.

Dashboard. El panel **Actividad Reciente** aparece vacío para tu rol: el detalle de la bitácora no es visible desde Almacén.

6

3. Recepción de materia prima

Es tu trabajo principal en el sistema.

3.1 Paso a paso

1. **Inventario** → pestaña **Recepción**.
2. En **1. Escanear código del material**, dispara la pistola sobre el código del material (no el del lote). También puedes escribirlo y pulsar **[Enter]**, o usar el botón de cámara.
3. El sistema responde Material encontrado: ... en verde y abre el resto del formulario. Si responde Material no encontrado. Registra el material primero., ve a la sección 4 de este manual.
4. Llena los datos del lote:
 - *Número de Lote* — el que trae la etiqueta del proveedor.
 - *Cantidad* — en la unidad que indica la etiqueta del campo (kg, L, etc.). Es lo que realmente recibiste, no lo que dice la orden de compra.
 - *Proveedor*.
 - *Fecha de Caducidad*.
 - *Certificado de Análisis (referencia)* — opcional, texto libre.
5. Pulsa **[Registrar Lote (Cuarentena)]**.

Recepción: primero se identifica el material, después se capturan los datos del lote.

Si todo salió bien aparece Lote registrado exitosamente en CUARENTENA y el formulario se limpia. Si algo falló, el mensaje se pinta de rojo y **no se registra nada**: corrige y vuelve a intentar.

3.2 Reglas que el sistema aplica solo

CUARENTENA

Todo lote entra en CUARENTENA. No hay forma de registrar un lote como aprobado directamente, ni siquiera si viene con su certificado. La liberación es un acto aparte, y lo hace Calidad.

No se puede recibir un lote ya caducado. Si la fecha que capturas ya pasó, el sistema rechaza el alta. Revisa la etiqueta antes de teclear: un error de dedo en el año es el motivo más común de que el alta no pase.

Cómo cuenta el sistema la caducidad

La fecha de caducidad es una **fecha de calendario de la planta**, no una hora: la que capturas es la que ves después en la tabla de lotes, sin desfases por huso horario. El criterio es que el lote **deja de poder usarse a las 00:00 del día de su caducidad**; es decir, el día que marca la etiqueta ya no se dispensa. **Esta regla está por confirmar con el cliente.** Si en la planta el criterio es otro (por ejemplo, que el lote sirva durante todo su día de caducidad), avísalo antes del arranque: cambia qué lotes acepta la estación el día del corte.

Un lote registrado no se puede corregir ni borrar desde ninguna pantalla. Si capturaste mal la cantidad, el proveedor o la caducidad, avisa de inmediato a Calidad y al administrador. Verifica los datos **antes** de pulsar el botón.

El número de lote es único: si lo repites, el sistema responde Ya existe un registro con esos datos.

4. Materiales

4.1 Consultar existencias

Inventario → pestaña **Materiales**.

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	STOCK ACTUAL	STOCK MIN	LOTES
MAT-ALM-004	Almidón de Maíz Desintegrante y diluyente	kg	0.00	8	0
MAT-CEL-002	Celulosa Microcristalina Excipiente diluyente y aglutinante	kg	0.00	10	0
MAT-SIO-005	Dióxido de Silicio Coloidal Deslizante y adsorbente	kg	0.00	1	0
MAT-EST-003	Estearato de Magnesio Lubricante para compresión	kg	0.00	2	0
MAT-IBU-006	Ibuprofeno Principio activo antiinflamatorio	kg	0.00	3	0
MAT-LAC-007	Lactosa Monohidrato Excipiente diluyente	kg	0.00	15	0
MAT-PAR-001	Paracetamol (Acetaminofén) Principio activo analgésico y antipirético	kg	0.00	5	0
MAT-PVP-008	Povidona (PVP K30) Aglutinante húmedo	kg	0.00	3	0

Materiales con código, unidad, stock actual, stock mínimo y número de lotes.

Las filas que están **por debajo del stock mínimo** se resaltan en rojo. Esa es tu señal de reposición; el sistema no manda avisos por ningún otro medio.

4.2 Dar de alta un material nuevo

Sólo si el material no existe todavía. Un material es el *tipo* de insumo (Paracetamol, Lactosa); un lote es *una entrega concreta* de ese material.

1. En la pestaña **Materiales**, pulsa **[+ Nuevo Material]**.
2. *Código (barras)*: el identificador con el que se va a escanear. Tiene que ser único.
3. *Nombre*: cómo lo va a leer el operario en la estación.
4. *Unidad*: kg, g, L, mL, mg o unidad. **Elígela bien**: es la unidad en la que se van a capturar todas las cantidades y todos los pesajes de ese material.
5. *Stock Mínimo*: el nivel que enciende el resaltado rojo.
6. *Descripción*: opcional.
7. **[Guardar]**.

La unidad de un material no se puede cambiar después, y tampoco se puede borrar un material. Confírmala con Calidad o con Desarrollo antes de guardar.

5. Lotes

Inventario → pestaña **Lotes**. Aquí ves cada lote con su cantidad restante sobre la cantidad inicial, proveedor, caducidad y estado.

PharmaWeigh Control de Producción		Inventario Gestión de materiales y lotes				
Dashboard Inventario Códigos de Barras		Materiales Lotes Recepción				
LOTE	MATERIAL	CANTIDAD	PROVEEDOR	CADUCIDAD	ESTADO	ACCIONES
LOT-LAC-2026-CT2	Lactosa Monohidrato	12.00 / 12.00	Lactosa MX	31/12/2027	CUARENTENA	
LOT-LAC-2026-CT1	Lactosa Monohidrato	12.00 / 12.00	Lactosa MX	31/12/2027	CUARENTENA	
LOT-CEL-2024-001	Celulosa Microcristalina	50.00 / 50.00	ExcipPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-ALM-2024-001	Almidón de Maíz	30.00 / 30.00	Almidones del Centro	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-SIO-2024-001	Dióxido de Silicio Coloidal	3.00 / 3.00	SilicaPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-IBU-2024-001	Ibuprofeno	13.00 / 15.00	ApiPharma Internacional	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-LAC-2024-001	Lactosa Monohidrato	38.50 / 40.00	Lactosa MX	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-PVP-2024-001	Povidona (PVP K30)	7.70 / 8.00	PolymerPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-PAR-2024-001	Paracetamol (Acetaminofén)	25.00 / 25.00	Farmaquímicos SA	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-EST-2024-001	Estearato de Magnesio	4.96 / 5.00	Lubrichem MX	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-PAR-2024-002	Paracetamol (Acetaminofén)	10.00 / 10.00	Química Global	18/9/2027	APROBADO	Retener

Vista de Almacén. En el lote en cuarentena la columna **ACCIONES** aparece **vacía**: tu rol no lo puede liberar.

5.1 Los estados

Estado	Significado
CUARENTENA	Recién recibido, o retenido después de haber estado aprobado. No se puede dispensar.
APROBADO	Liberado por Calidad. Es el único estado que la estación acepta.
RECHAZADO	Descartado por Calidad. Definitivo.
AGOTADO	Llegó a cero. Lo marca el sistema solo, nadie lo pone a mano.

5.2 Lo único que puedes cambiar: **[Retener]**

En las filas con estado **APROBADO** tienes el botón **[Retener]**: regresa el lote a **CUARENTENA**. Úsalo si detectas un problema físico después de la liberación (empaquete dañado, identificación dudosa, condiciones de almacenamiento fuera de especificación).


En las filas en cuarentena no verás ningún botón. No es una falla de la pantalla: aprobar y rechazar están reservados a Calidad, Supervisión y el Administrador. Si intentas forzarlo, el sistema responde Solo Calidad, Supervisor o Admin pueden aprobar o rechazar lotes.

[Retener] se aplica con **un solo clic, sin confirmación**, y es correcto que así sea: no rompe nada irreversible, porque Calidad puede volver a aprobar el lote. (El que sí pide confirmación en dos pasos es **[Rechazar]**, que tu rol no tiene.)

Pero **sí detiene la línea** si ese lote estaba en uso, así que avisa a Calidad y a Supervisión cuando lo hagas.

6. Códigos de barras

Códigos de Barras genera las etiquetas en pantalla. Para tu rol hay **dos** pestañas: **Lotes** y **Materiales** (la de gafetes sólo la ven Administración y Supervisión).

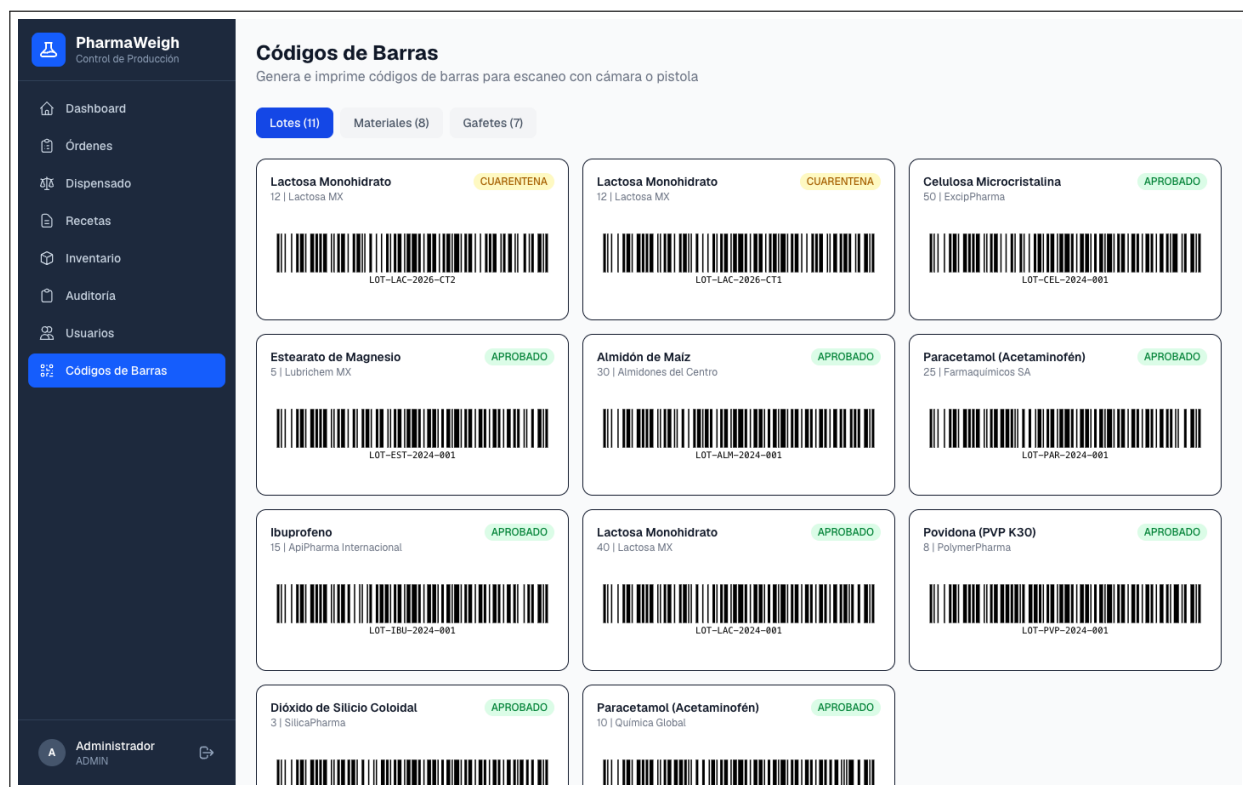

Página de códigos. Cada tarjeta trae el nombre, el estado del lote y su código de barras.

Dos formas de usarla:

- **Imprimir:** usa la impresión del navegador (Ctrl+P o Cmd+P). La página está preparada para que las tarjetas salgan legibles en blanco y negro. No hay un botón de imprimir dentro de la aplicación.
- **Desde el celular:** abre la página en el teléfono y escanea de ahí con la cámara de la estación.

Etiquetado

Pega la etiqueta del **lote** en el contenedor en cuanto lo recibas. Es la que el operario va a escanear en la estación; si el contenedor no la trae, el pesaje se detiene ahí.

7. Equipo de trabajo

7.1 Pistola lectora de código de barras

Funciona como un teclado: lee el código, lo escribe en el campo y manda el Enter sola. No necesita configuración ni instalación en el sistema.

Si no lee: limpia la ventana del lector, verifica que la etiqueta no esté arrugada ni mojada, y prueba a **escribir el código a mano** y pulsar Enter. El campo acepta las dos cosas. También hay un botón de cámara a la derecha del campo.

7.2 Báscula

La báscula no está conectada al sistema. No hay integración con ningún instrumento. Las cantidades que registras en Recepción las **tecleas** tú, leyendo la balanza o la documentación del embarque. El sistema guarda lo que escribas, sin poder comprobarlo.

8. Qué sí puedes romper

Riesgo	Por qué importa
Capturar mal la cantidad	Es el inventario del que se va a descontar cada pesaje. Un lote no se puede editar ni borrar.
Capturar mal la caducidad	Si la pones más lejos de lo real, la estación va a aceptar un material vencido. El sistema confía en lo que tecleaste.
Equivocar el número de lote	Rompe la trazabilidad con la documentación del proveedor y no se puede corregir.
Elegir mal la unidad de un material	No se cambia después. Todas las recetas y pesajes de ese material quedan atados a ella.
Etiquetar un contenedor con el código de otro lote	El sistema valida el código, no el contenido. Es el único punto donde un error humano pasa desapercibido.
Retener sin avisar	Detienes la línea sin que nadie sepa por qué. Avisa a Calidad y a Supervisión.

9. Preguntas frecuentes

Escaneo el material y dice que no se encuentra

Ese material no está dado de alta, o el código no coincide. Verifica el código en la pestaña **Materiales**; si de verdad no existe, dalo de alta con [\[+ Nuevo Material\]](#) y vuelve a Recepción.

¿Puedo modificar un lote que ya registré?

No. No hay pantalla de edición ni de borrado. Avisa a Calidad y al administrador; la corrección se hace desde el servidor y queda registrada.

¿Por qué no puedo aprobar un lote?

Porque la liberación es de Calidad (también pueden Supervisión y el Administrador). Tu rol recibe y retiene; no libera. Es una separación de funciones a propósito.

Registré un lote y no aparece para dispensar

Correcto: entró en **CUARENTENA**. Hasta que Calidad lo apruebe, la estación lo rechaza.

No veo el menú de Órdenes ni el de Auditoría

Tu rol no tiene acceso a esas pantallas. No es una falla.

¿Qué hago con un lote rechazado?

Sepáralo físicamente según el procedimiento de la planta. En el sistema queda **RECHAZADO** para siempre; no se puede reactivar.

Se bloqueó mi cuenta

Fueron 5 intentos fallidos con tu correo en 15 minutos. Espera 15 minutos. No hay botón de desbloqueo ni de recuperación de contraseña: si la perdiste, el administrador tiene que generarte una nueva desde el servidor.